

SÄNGBORD
Art.: 272010

Bruksanvisning



Tilted use Example



Adjustable horizontally
and vertically



Easy to adjust
without tools



1. Introduktion

Gratis och tack för att du har valt an Mobilex produkt av hög kvalitet. Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning och viktig information om användningen av den medicinska produkten. Den är avsedd att hjälpa dig att använda produkten korrekt och säkert. Det är mycket viktigt att läsa igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsriktlinjerna och följ dem alltid. Mobilex försöker ständigt förbättra och uppdatera sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data för produkten utan föregående meddelande.

Användning av anordningen

De här borden är utformade för att användas när man sitter i antingen en stol eller en säng och ger en höjdjusterbar platt yta för att läsa, skriva, äta etc. Bordsskivan kan lutas för ökad komfort vid användning. Vikten av dessa föremål får inte överstiga bräckens bärförmåga (se specifikationerna nedan).

Indikationer

På grund av det breda spektrumet av möjliga tillämpningar kan indikationerna inte vara bundna till ett specifikt kliniskt område, eftersom borden lämpar sig för flera olika tillämpningar som involverar personer med begränsad rörlighet.

Kontraindikationer

Kontraindikationer kan inte knytas till ett specifikt kliniskt område. Läs säkerhetsinformationen.

Användningsområden

Produkten kan användas inom hemvård, hälso- och sjukvård, långtidsvård och sjukhus.

Medicinska incidenter och oönskade händelser

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om det inträffar några oönskade händelser i samband med enheten:

Mobilex A/S	Telefon:	+45 87 93 22 20
Grønlandsvej 5	Telefax:	+45 87 93 17 77
DK-8660 Skanderborg	Email:	info@mobilex.dk
Denmark		

2. Säkerhetsanvisning

- Se till att alla personer som använder apparaten har läst den här handboken.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador och/eller personskador som uppstår om man inte följer bruksanvisningarna.
- Använd endast produkten i felfritt skick.
- Om defekter eller fel upptäcks måste du omedelbart kontakta återförsäljaren.
- Följ alla tillverkarens rekommendationer och varningar.
- Var uppmärksam på informationen på produktetiketten.
- Använd produkten endast för det beskrivna ändamålet.
- Klättra inte upp på apparaten.
- Undvik att göra konstruktiva ändringar på enheten, om du inte har tillverkarens skriftliga godkännande för sådana ändringar.
- Under olika justeringar som är möjliga på apparaten måste användaren se till att inte klämma fingrarna eller andra kroppsdelar mellan två rörliga delar av apparaten.
- Överlasta inte bordsskivan, maxbelastning 15 kg.
- Kontrollera att handhjulen är säkra med jämna mellanrum.
- Försök inte att använda bordet som gånghjälpmedel.
- Försök inte sitta eller stå på bordet.
- Anordningen får endast användas på plana, släta och stabila ytor.
- Alla hjul ska vara i kontakt med golvet hela tiden under användning. Detta säkerställer att produkten är korrekt balanserad och bör undvika olyckor.
- Apparaten är inte flamskyddad. Lämna den inte i närheten av eldkällor, antändning eller extrem värme.

Leveransens omfattning

Apparaten levereras i en kartonglåda, demonterad för att underlätta transporten.

Innehållet i ett paket är:

- ✓ Bordsben (endast med hjul) X 2
- ✓ Tvärstång (med hjul) X 1
- ✓ Bordsskiva X 1
- ✓ Teleskopiskt rör X 2
- ✓ Handhjul - långt X 2
- ✓ Umbraco-skruv - kort X2
- ✓ Monteringsdelar och verktyg (3 x 2 x 1) (1-9)

Preliminär kontroll

Kontrollera innehållet i lådan med listan ovan. Om du i detta skede upptäcker att en del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart din leverantör.


3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Överbäddsbord med höjd- och lutningsjusterbart träspånskivebord och en metallram. Det levereras med 2 låsbara hjul.

Tabellen består av följande delar:

1. Spånskivebricka - Standardbordsbricka.
2. Höjdjusteringsknappar - De gör det möjligt att justera brickans höjd och vinkel.
3. Hjulås - De förhindrar att bordet rör sig.
4. Fyra vridbara hjul - Tack vare dessa hjul kan bordet enkelt omplaceras.

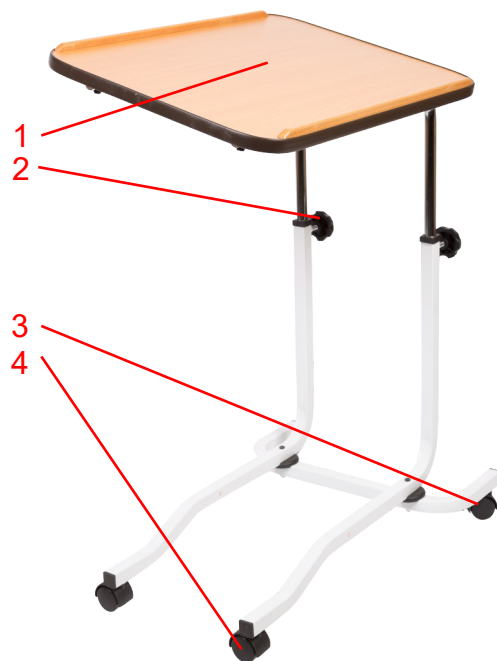

Funktionsbeskrivning

Justering av höjd och lutning

För att justera höjden på brickan lossar du de två knapparna (2), skjuter rören till önskat läge och drar åt knapparna igen. För att ändra brickans vinkel är det bara att skjuta ett av rören högre eller lägre än det andra medan du justerar det.

Låsbara vändhjul

De två vändhjulen kan låsas på plats genom att trycka ner plastpedalen.

VARNING! Hjulen måste vara helt låsta och bordet säkrat på plats innan de används.

Montering

Monteringsanvisningarna finns på sista sidan i den här handboken.

Tillbehör


Det finns inga tillbehör till den här enheten.

4. Tekniska data

Sängbord	Artikel nr. 272010
Storlek på brickan (bredd x längd)	41 x 55 cm
Höjd (justerbar)	61 - 87 cm
Vikt	7,5 kg
Bärförmåga	15 kg

Produktetikett

En produktetikett placeras på ramens framsida.

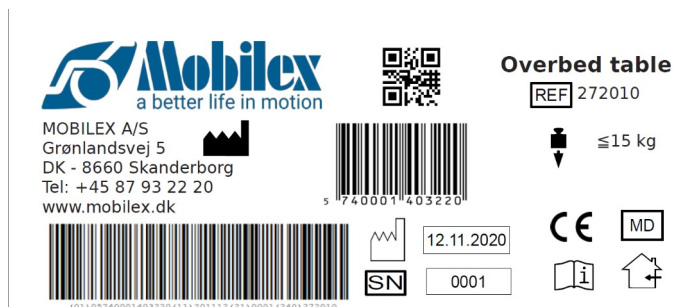

Exempel på produktetikett

	QR-kod till webbplatsen		Producent
	CE-märkt produkt		Varenr
	Se bruksanvisningen		Max belastning
	Medicinsk utrustning		Produktionsdato
	Används inomhus		serienr.

Betydelsen av ikonerna

5. Underhåll och skötsel

Normal smuts kan avlägsnas med vanliga rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Kontrollera den specifika produktinformationen och använd endast kommersiella rengöringsmedel som är lämpliga för rengöring och desinfektion (använd inte alkoholhaltiga produkter och inga lösningsmedel eller slipmedel).

Apparaten behöver i princip inte underhållas. Trots den solida konstruktionen och användningen av motståndskraftiga material utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att produkten kontrolleras med jämna mellanrum av en professionell service. Vi rekommenderar att följande kontrolleras:

- ✓ Rengöring och desinfektion av produkten
- ✓ Ramen/produkten bör kontrolleras om den är böjd, skadad, sliten eller korroderad.
- ✓ Slitdelar ska kontrolleras och bytas ut vid behov.
- ✓ Generell åtdragning av produkten
- ✓ Rengöring av hjulen i varmt vatten med ett mildt rengöringsmedel. Smörj lageroljan regelbundet eller när hjulen börjar gnissla.

Förväntad livslängd: Normalt 10 år beroende på användning.

Förvaring: Vi rekommenderar förvaring på ett torrt ställe vid temperaturer över 0 °C.

Transport

Anordningen ska transporteras på ett stabilt och säkert sätt utan risk för plötsliga eller farliga rörelser under transporten.

Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Före återanvändning, om en ny användare ska ta över produkten, ska produkten kontrolleras i enlighet med punkt 5.

6. De vanligaste problemen och lösningarna

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Hjulen vänder inte smidigt och lätt	Det finns smuts i hjulen	Det finns smuts i hjulen

För att utföra grundläggande serviceåtgärder räcker det med en uppsättning hylsnycklar eller en justerbar skiftnyckel, en platt skruvmejsel och en kryssskruvmejsel.

7. Bortskaffande av produkten

Produkten får inte slängas med hushållsavfallet utan måste lämnas till den lokala återvinningscentralen.

8. Villkor för garanti

Mobilex A/S erbjuder 2 års garanti för skador som orsakats av fel i produktionen eller materialfel. Garantin gäller inte vid icke avsedd reparation eller användning av produkten. Delar som utsätts för normalt slitage omfattas inte av garantin, såvida inte slitaget orsakas av ett tillverkningsfel. Om produktändringar görs utan vårt skriftliga godkännande är CE-märkningen och produktgarantin inte giltiga. Vid produktskador som omfattas av garantin ska du meddela din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt. Garantin täcker inte transportkostnader och omfattar inte ersättning för personskador eller för att produkten inte används under reparationen. Garantin täcker inte skador som beror på att användarhandboken inte följts.



