

NIMBO



Förord

Tack för att du har valt en produkt från Drive DeVilbiss.

Du kommer inte att bli besviken över designen, funktionaliteten och kvaliteten på denna produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före första användningen. Den innehåller viktig säkerhetsinformation och värdefulla tips för korrekt användning och skötsel.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information, kontakta din Drive DeVilbiss specialiståterförsäljare som levererade din produkt.

Denna bruksanvisning innehåller all viktig information för justering och drift. Den senaste bruksanvisningen finns som PDF online eller kan beställas från kundtjänst.

Förstorade format för synskadade kan visas.
Synskadade användare måste instrueras av sin vårdare.

Reparationer samt vissa justeringar kräver särskild teknisk utbildning och måste därför utföras av återförsäljaren av medicintekniska produkter.

Declaration of conformity

Ovanstående produkter förklaras härmed överensstämma med EU:s förordning för medicinska produkter 2017/745.

Produktlivslängd

Vårt företag antar en livslängd på fem år för denna produkt så länge produkten används på avsett sätt och alla underhålls- och servicekrav följs.

Denna livslängd kan avsevärt överskridas om produkten hanteras, repareras, underhålls och används varsamt och det inte finns några tekniska begränsningar baserat på vidareutveckling av vetenskap och teknik.

Livslängden kan dock förkortas avsevärt genom extrem och felaktig användning. Vårt företags fastställande av livslängden representerar ingen ytterligare garanti.

Återvinning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.

Typskylt



1. Artikelnummer
2. Artikelbeteckning
3. Tillverkare
4. Serienummer
5. UDI-Code
6. Maximal belastning
7. Beakta Användaranvisningen
8. Medicinsk produkt
9. Produktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag som behövs för en säker användning överlämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testas av fackfolk, samt rengöras och sättas i gott skick

I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. För tillbehör, kontakta Euforia AB.


Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett material- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar kostnadsfritt.

Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel.

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.

Produktens delar

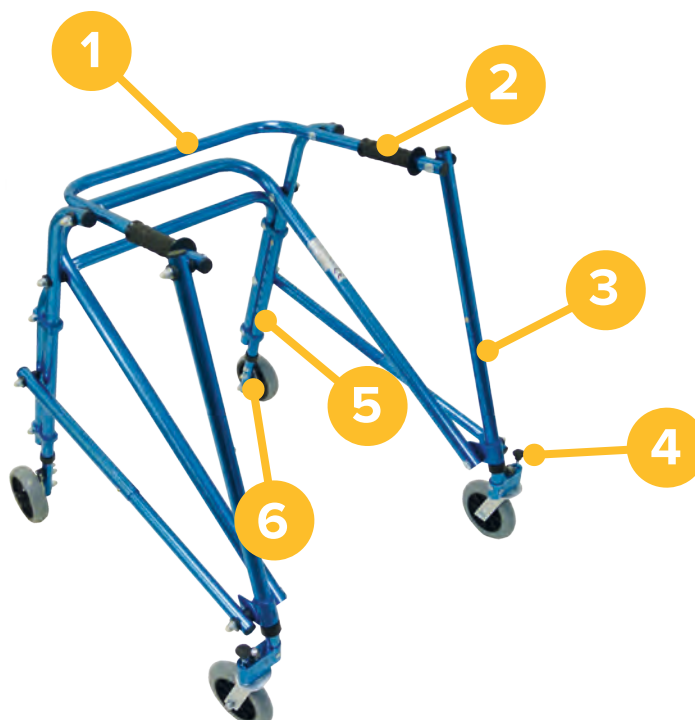

NIMBO

1. Ram
2. Handtag
3. Höjdjustering fram
4. Bakre hjullås
5. Höjdjustering bak
6. Backstopp

Indikation | Kontraindikation

INDIKATION:

Gånghjälpmedel för barn och ungdomar i 4 olika storlekar för användning inomhus för att kompensera för eller förbättra begränsad gångförmåga och för att korrigera kroppshållningsproblem.

Målet är att lära sig att gå aktivt eller självständigt förflytta sig, att utöka en begränsad handlingsradie och att kompensera för ostadiga gång.

Barnens gånghjälpmedel Nimbo dras bakom kroppen. Som ett resultat ökar gånghjälpmedlet bakstabiliteten när du står och ger optimal rörelsefrihet för benen.

KONTRAINDIKATION:

Begränsning av rörligheten vid försämrad rörelse/koordination/balans – men ändå tillräckligt bevarad gångförmåga om användningen av andra gånghjälpmedel inte är tillräcklig.

Att upprätthålla/främja/säkra gång och stå (gångträning). Generellt sett bör indikation för gångträning ske under medicinsk/ortopedisk övervakning. Av denna anledning bör det, innan gånghjälpmedlet tillhandahålls, klargöras i detta avseende om det finns kontraindikationer för patienten. Hjälpmiddel för gångträning bör i allmänhet inte tillhandahållas om t.ex. fotfel och/eller smärtsymptom förekommer. Om du är osäker på indikation och kontraindikation, tala med ansvarig läkare och/eller terapeut.

För att undvika osäkerhet kring indikation och kontraindikation rekommenderar vi att du konsulterar din behandlande läkare och/eller terapeut.

Leverans

1 x	Nimbo gåstativ för barn
1 x	Användaranvisning och montering




Säkerhetsföreskrift


- Läs dessa bruksanvisningar noggrant.
- Alla komponenter bör kontrolleras för skador och en säker passform före användning. Använd inte produkten om det finns några defekter!
- Använd produkten endast som ett gånghjälpmedel!
- Använd produkten endast på en jämn och fast yta.
- Notera den tillåtna maximala vikten för användaren. Denna information finns i de tekniska data i denna bruksanvisning samt på typskylten.
- Användning på rulltrappor och liknande är uttryckligen förbjuden!
- Häng inga påsar på handtaget – tippningsrisk!
- Vid vikning och utvikning av produkten kan kläder och kroppsdelar komma i kläm.
- Skydda produkten från direkt solljus. Produktdelar kan bli varma och orsaka hudskador vid beröring.
- Före varje användning, se till att din produkt är intakt och att alla justerbara delar är ordentligt säkrade.
- Kontrollera skruvarna på produkten regelbundet och dra åt tio vid behov.
- Korrekt användning av produkten kräver noggrann och noggrann utbildning av vårdgivaren.
- Användare som har svårt att läsa måste få bruksanvisningen uppläst för att förstå hur produkten ska hanteras..
- Endast för inomhusbruk!
- Använd endast under uppsikt..
- Varje allvarig incident som inträffar i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten befinner sig.

Innan användning

Nimbo har en fällbar aluminiumrörarm och är även justerbar i höjdled vid hjulen. För att fälla ut den, lägg Nimbo på marken, håll den ungefär i mitten av den främre ramen och vik ut ramen. Tänk på att fjäderklämmorna i teleskoprören alltid måste klicka på plats när du fäller ut den (hörbart klick) (bild 2).

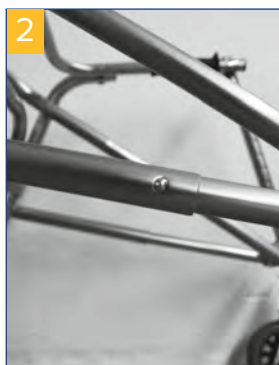


För montering behöver endast fram- och bakhjulen sättas in.

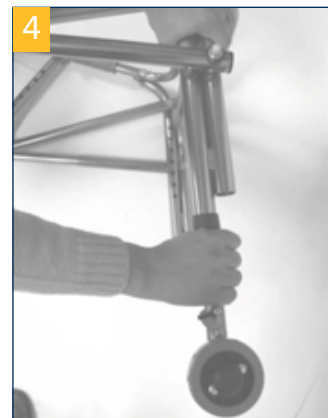

Framhjulsbroms

För att låsa framhjulen, räta ut hjulen (1), dra sedan låssprinten uppåt (2) och vrid den 90° (3) tills den klickar på plats i den gångjärnsförsedda plattan (4). Upprepa proceduren för att frigöra hjullåset.

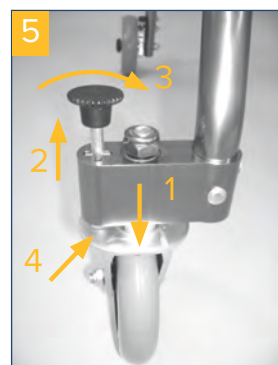

Aktivera backspärr | Inaktivera backspärr

Aktivera backspärr

Anslut låsspaken med kugghjulet vid hjulaxeln (bild 6).

Inaktivera backspärr

Släpp låsspaken igen och tryck den uppåt i det avsedda fästet (bild 7).



Höjdjustering

De främre (**bild 8**) samt bakhjulen (**bild 9**) har 8 lägen för höjdjustering. För att justera höjden, tryck på fjäderns säkerhetsspärr (pil) och flytta rören efter önskemål. Se till att fjäderns säkerhetsspärr alltid klickar på plats!



Fälla ihop

För att fälla upp barnens gångram, tryck på fjäderns säkerhetsspärr på tvärröret och tryck sedan ihop ramen mot sig själv (**bild 10**).



Rengöring | Underhåll

- Rengör regelbundet med en fuktig trasa!
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel.
- Använd inte slipande rengöringsmedel!
- Använd inga högdoserade klor- och vinägerbaserade rengöringsmedel!
- För att desinficera kan ett spraydesinfektionsmedel användas som Descosept AF eller Bacillol AF.
- Kontrollera regelbundet metall- och skruvförbanden med avseende på slitage och stabilitet och säkerställ stabilitet. Dra åt skruvarna vid behov.
- Kontrollera särskilt att fjäderns säkerhetsspärr har klickat på plats. Kontakta ansvarig återförsäljare om en anslutning inte är i korrekt form.
- Produkten bör inte utsättas för temperaturer över 60°C under långa perioder (till exempel användning i bastu, etc.).
- Vid defekter, kontakta din återförsäljare där du köpte denna produkt.
- Kontrollera regelbundet däckens skick. De är "fail-safe", vilket innebär att du inte behöver kontrollera lufttrycket eller fylla dem med luft. Kontrollera dock alltid att däcken inte har revor eller andra skador.
- Nödvändiga reparationer/underhåll får endast utföras av utbildad personal.

Teknisk specifikation

STORLEK	NIMBO S	NIMBO M	NIMBO L	NIMBO XL
Artikelnummer	705100100	705100200	705100300	705100400
HMV (medical aids register) nr.	10.46.02.3030			
Ramhöjd (upp till ca.)	114 cm	122 cm	155 cm	160 cm
Totallängd	54 cm	74 cm	85 cm	95 cm
Totalbredd	59 cm	61 cm	67 cm	69 cm
Totalhöjd	39 - 49 cm	49 - 66 cm	58 - 77 cm	76 - 95,5 cm
Bredd mellan handtagen	34,5 cm	34,5 cm	38,5 cm	41,5 cm
Bredd mellan bakhjul	41 cm	42,5 cm	48 cm	48 cm
Hjulstorlek, fram	Ø 12,6 cm x 2,6 cm			
Hjulstorlek, bak	Ø 12,3 cm x 3,2 cm			
Mått i hopfällt läge (LxBxH)	75 x 59 x 14 cm	77 x 60 x 14 cm	87 x 65 x 15 cm	113 x 68 x 17 cm
Vikt	3,8 kg	4,3 kg	5,4 kg	6 kg
Max brukarvikt	30 kg	50 kg	70 kg	90 kg
Färg	Gul	Grön	Blå	Midnattsblå
Material Ram	Aluminiumrör, anodiserat			
Material Handtag	Plast			