

1. Egenskaper

Dusch- och toalettstolen är tillverkad av pulverlackerad aluminiumram. Den har uppfällbara armstöd för enkel in- och urstigning för personer med nedsatt rörlighet. Den är utrustad med en sits med kil av PU, fyra svängbara 5" hjul med bromsar, tippbara fotstöd och en sanitetsbehållare. Stolens konstruktion gör det möjligt att glida över toalettstolen.

Setet innehåller: ram, sits, fyra svängbara 5" hjul med bromsar, fyra C-typ monteringsspännen, ryggstöd med armstöd, två ryggstödslåsstift, höger och vänster fotstöd med fotplatta, sanitetsbehållare med lock.

Stolens delar:



2. Användning

Dusch- och Hygienstolar är designade för personer som har problem med oassisterad rörelse och för patienter med dysfunktioner och nedsatt rörlighet. Stolen är endast lämplig för inomhusbruk. Stolen får endast användas med hjälp av medföljande person. Stolen fungerar som en dusch- och hygienstol tack vare sanitetsbehållaren under sitsen och fyra svängbara hjul. Det underlättar vardagliga hygienaktiviteter. Stolen rekommenderas speciellt till personer som har problem med rörlighet som orsakas av: förlamning, fetma eller onormal undervikt, degeneration eller missbildning, degeneration eller ledsador, lemskador eller amputationer, hjärt- och kärlstörningar och cirkulationsrubbningsar.

3. Montering



Bild 1

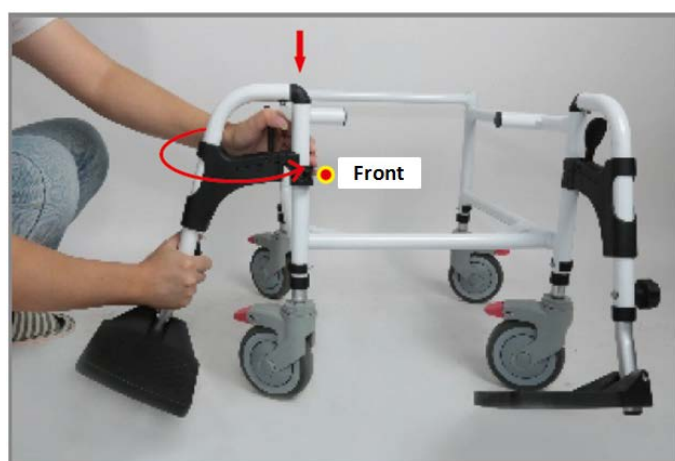


Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7

Bild 1. Installera de fyra hjulen i huvudramen. Rikta in hålen i önskad höjd och lås varje hjul med ett C-spänne.

Notera! Alla hjul måste ställas in på samma höjd.

Bild 2. Sätt in fotstöden i huvudramen från sidan och vrid dem sedan framåt tills fotstödsspärren låses på plats.

Bild 3. Fäst sätet på stolens ram genom att trycka på det tills det låses på plats (sätets framsida indikeras av kilen).

Bild 4. Montera ryggstödet med armstöd i hålen på baksidan av ramen. Rikta in hålen och lås dem med två låsstift för ryggstödet.

Bild 5. Sätt in sanitetsbehållaren i glidarna från baksidan av sätet.

Bild 6. Stolen har en 4-steps höjdjustering.

Notera! Alla hjul måste ställas in på samma höjd.

Bild 7. Fotstöden har en 3-steps höjdjustering - justerbar med låsvreden.

Produkten är klar att användas.

FÖRE ANVÄNDNING

- Kontrollera skicket på bromsar, konstruktion och länkhjul. Kontrollera korrekt montering av komponenterna och deras justering.
- Före användning, se till att stolens bredd överensstämmer med användaren, eftersom stolen inte är utrustad med breddjustering.
- Stolen är designad för att användas korta avstånd och endast inne. Stolen har ingen stötdämpare, så långvarig användning rekommenderas inte.

OBS! Använd inte stolen om några defekter eller brister upptäcks.

FÄLL UPP ARMSTÖDEN

- Lyft armstödet uppåt med en försiktig rörelse.
- **Använd inte** armstödet som ett stöd när du står upp. Om hjälp behövs – be om hjälp.

BROMSARNA

För att låsa hjulen trycker du på de röda pedalerna med foten. För att låsa upp hjulet, tryck på de svarta spakarna inuti de röda pedalerna med foten.

FOTSTÖD

- Fotplattorna ska vara i vertikalt läge när du sätter dig i eller ur stolen. **Använd inte fotplattorna som stöd när du stiger i eller ur stolen på grund av risken att välta.**

ATT SÄTTA SIG I STOLEN

- Det är viktigt att låsa bromsarna när du sätter dig i eller ur stolen, ändrar användarens position eller går av.
- När du byter plats ska stolen placeras så nära förflyttningsplatsen som möjligt. Stolen ska vidröra sängen eller annan sits som används. Om användaren inte kan byta sitt säte självständigt, flytta användaren till stolen.

- Användaren bör sitta så djupt som möjligt i mitten av sätet för att undvika stolin stabilitet.

4. Teknisk data

Totalbredd	57 cm
Inre bredd	45 cm
totaldjup	86 cm
Sitthöjd från golvet	49-56,5 cm
Totalhöjd	94-101,5 cm
Sittdimensioner	44 x 43 cm
Vikt	11,4 kg
Max brukarvikt	150 kg
Ramfärg	Vit

5. Notera

Euforia AB tar inte ansvar för felaktig användning av stolen och underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter.

6. Rengöring och underhåll

Utför underhållet av stolens komponenter regelbundet:

- Sitsen kan rengöras med en fuktig trasa och kallt eller varmt vatten, utan användning av rengöringsmedel. Svåra fläckar kan rengöras med en svamp.
- Plastelement bör rengöras med fuktig trasa med lämpliga rengöringsmedel för plastelement. Följ i så fall producentens instruktioner och säkerhetsåtgärder.
- Töm och desinficera toaletthinken och toaletsitsen efter varje användning. Använd rengöringsprodukter enligt tillverkarens rekommendationer.

7. Förvarings- och transport

Produkten bör inte utsättas för direkt solljus.

8. Garanti

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats.

Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

9. Etikett

	Referens nummer		Tillverkare
	LOT nummer		Tillverkningsdatum
	Serienummer		Medical device
	Notera		Läs instruktionerna
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		

Vårt kompletta produktsortiment finns tillgängligt på vår hemsida. Läs mer på: www.euforia.se

Tack för att du valde Euforia AB!