

P77916

NUVO Höjdjusterbar barn Hygienstol

⚠ Säkerhetsföreskrifter ⚠

Se till att du läser och följer dessa instruktioner noggrant. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.

Max användarvikt



1. ANVÄNDNING


NUVO höjdjusterbara Hygienstol är designad för att hjälpa barn som har svårt att komma åt eller använda en vanlig toalett. Den har ett ryggstöd, breddjusterbara armstöd och ett valfritt höftbälte (N99091) för att ge extra stöd vid behov.



2. SÄKERHET

Varning: Den maximala användarvikten får inte vara mer än 100 kg.

- För att undvika snubbelrisker, se till att vägen till stolen är fri från hinder.
- Kontrollera rutinemässigt hylsor för slitage.
- Kontrollera rutinemässigt att alla e-klipp finns.
- Se till att sätet torkas av med en antiseptisk våtservett efter användning.
- Stå inte på kommoden under några omständigheter, underlåtenhet att följa detta kan resultera i allvarliga skador.
- Luta dig inte bakåt, det kan göra att stolen välter.
- Om skada upptäcks, sluta använda stolen och kontakta din leverantör omedelbart för råd.

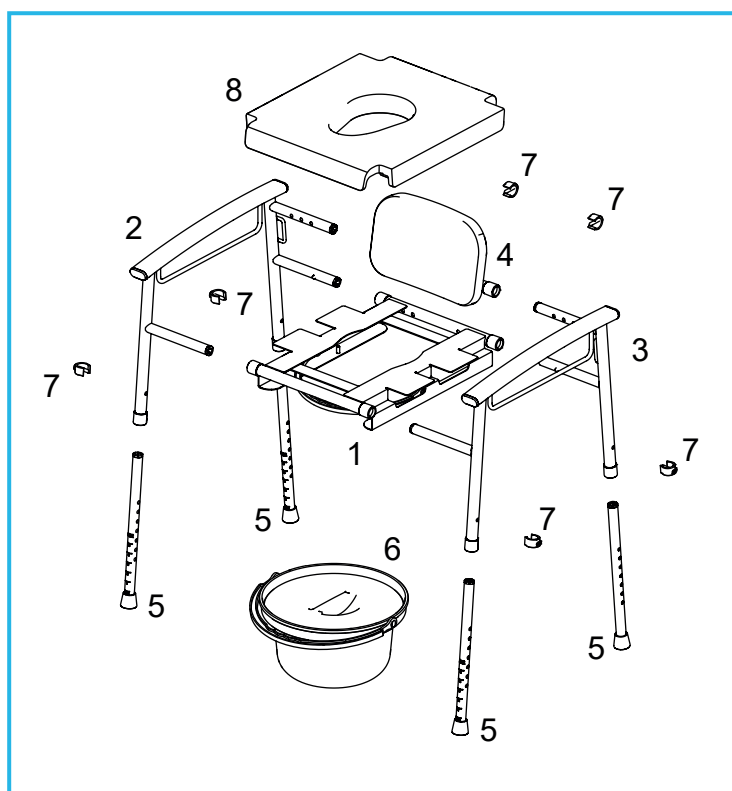

3. UPPACKNING


Ta bort förpackningen och kontrollera alla delar noggrant. Kontakta din leverantör omedelbart om delar saknas eller är skadade och försök inte montera.

3.1 Innehåll:

1. Montering av sätesram x 1
2. Sidoramsenhet (RH) x 1
3. Sidoramsenhet (LH) x 1
4. Ryggstödsenhet x 1
5. Ben x 4
6. Potta och lock x 1
7. E-clips x 6
8. PU vadderad sitslist x 1

4. MONTERING/INSTALLATION

4.1 Montering av ryggstödsenheten på LH Sidoramsmontering:

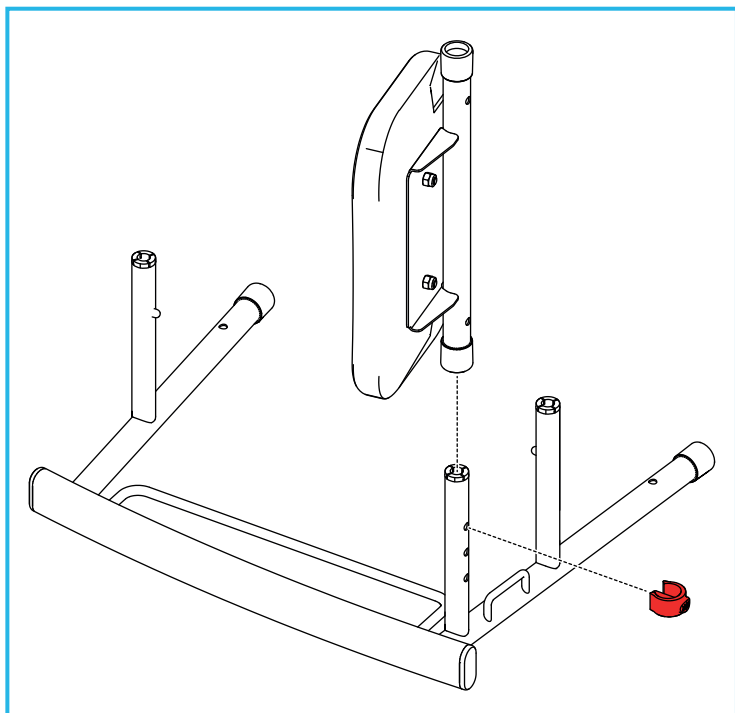


Sätt fast ryggstödsenheten på sidoramsenheten (LH) och fäst med 1 x E-klämma.



Kommoden har 3 breddinställningar. Ryggstödsenheten visas som monterad på den bredaste inställningen.

4.2 Montering av sätesramen:

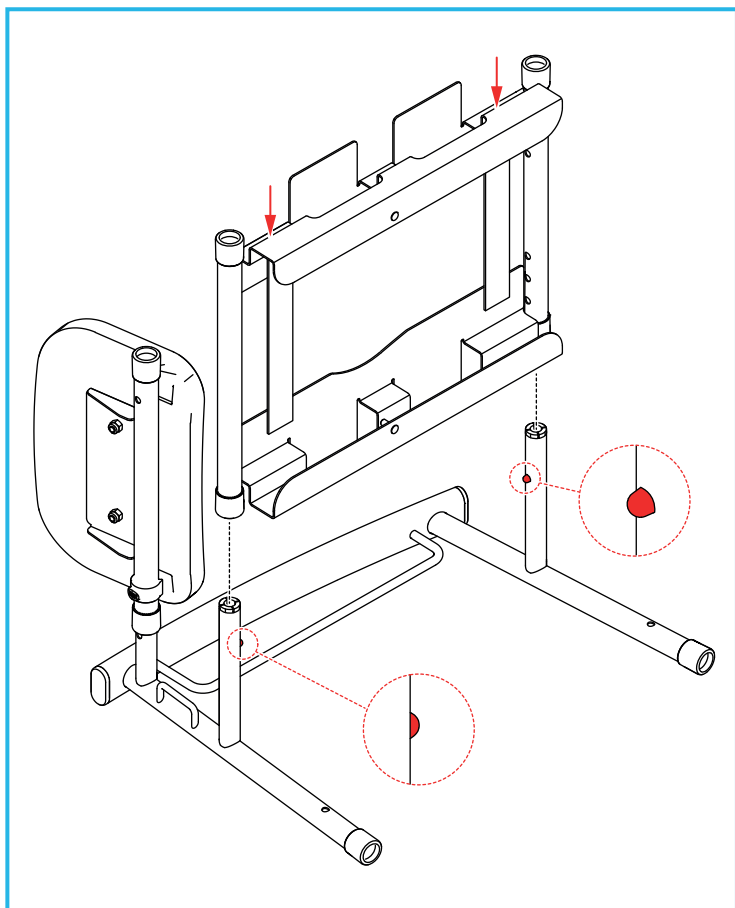

Sätt fast sidsramsenheten på den vänstra sidoramsenheten.

Tryck och håll in knappklämmorna och tryck sedan ned sätesramsenheten tills knappklämmorna klickar i rätt hållägen.




Sätesramspositionen måste vara i linje med ryggstödspositionen annars kommer den högra sidoramsenheten inte att passa korrekt.

4.3 Montering av den högra sidoramsenheten på Montering av ryggstöd/sitsram:



Om du monterar sidoramarna på den smalaste inställningen rekommenderas att du monterar den vadderade sitslisten innan du monterar

RH sidoramsmontage.

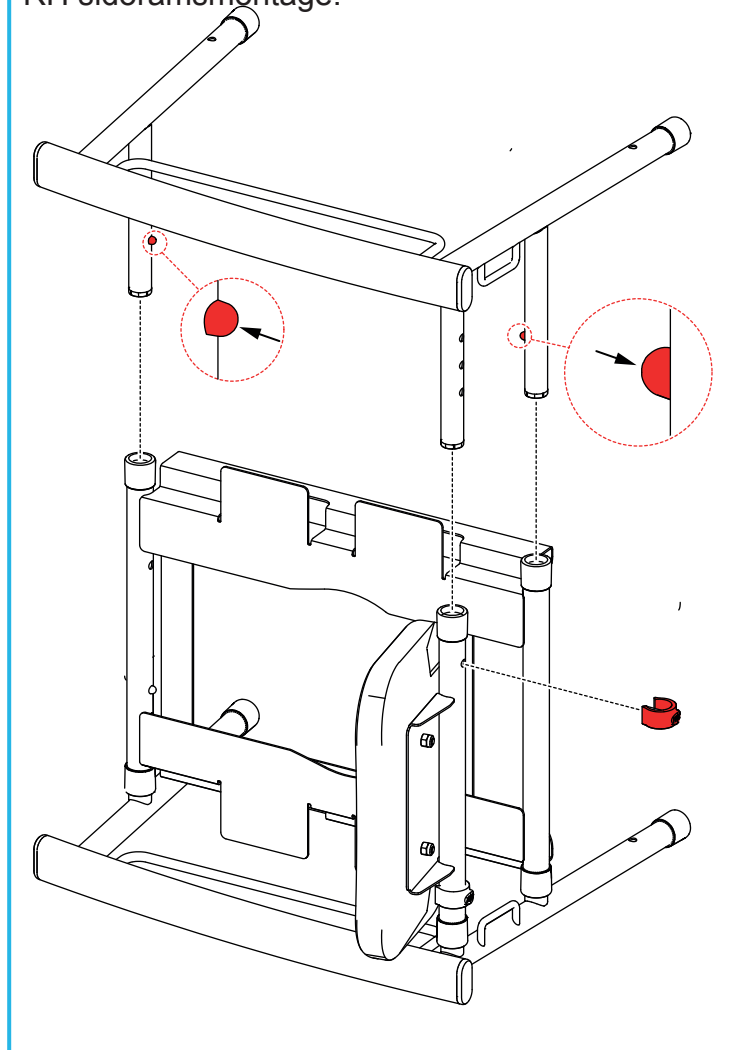


Sätt in den högra sidoramsenheten i säte/ryggstödsenheterna. Tryck och håll in knappklämmorna och tryck sedan ned den högra sidoramsenheten tills knappklämmorna klickar i rätt hållposition.



Den högra sidoramspositionen måste ställas in på samma breddläge som den vänstra sidoramsmonteringen.

4.4 Montering av benen:

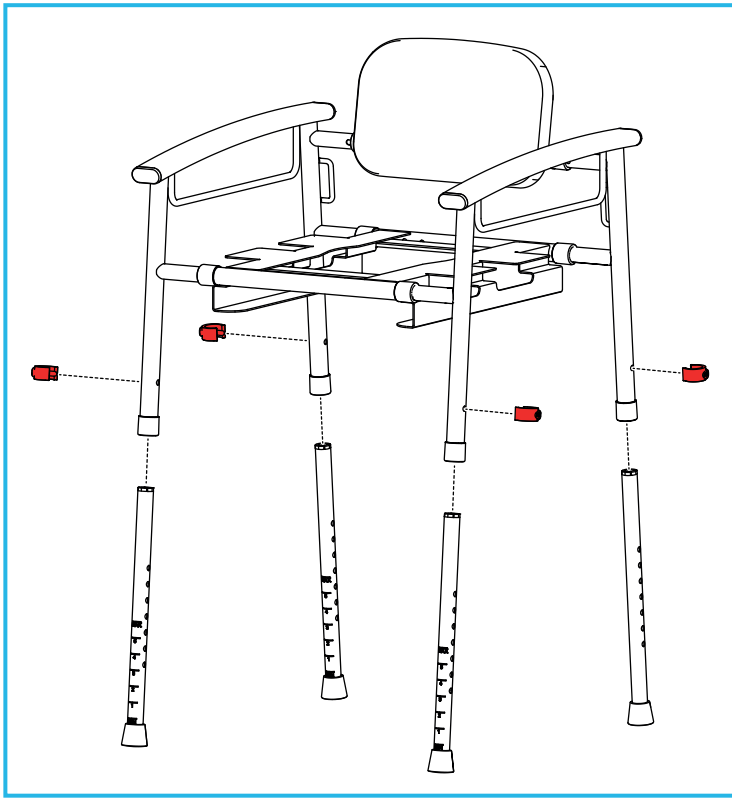


Sätt in benen i sidoramsenheterna och fäst med 4 x E-klämmor.



Se till att alla ben har justerats till samma höjd.

4.5 Montera det vadderade sätet:

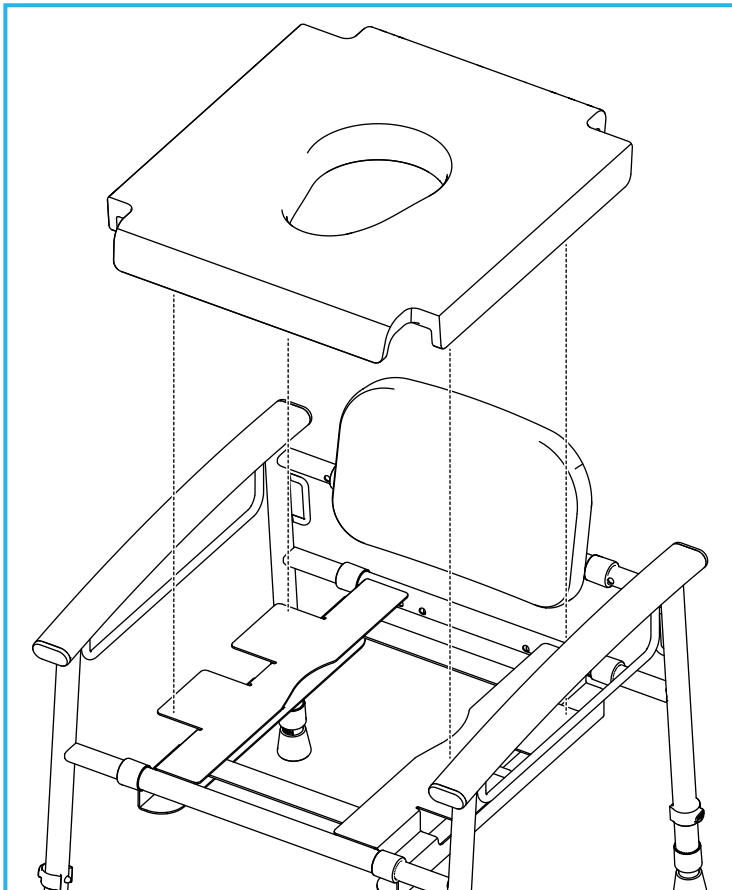


Montera det vadderade sätet på sätesramen.




Se till att kommoden är helt säker före användning.

4.6 Montering tillbehör midjebälte (N99091)

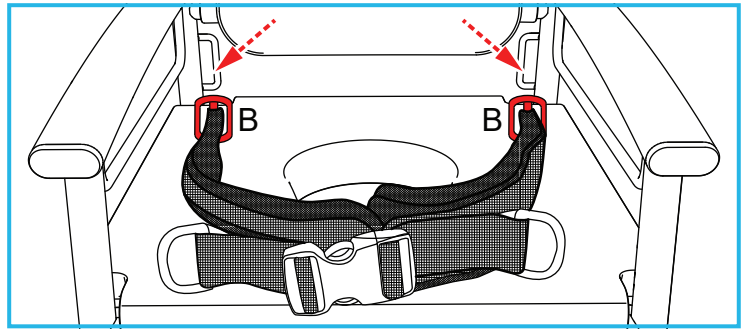

För att passa in den genomgående höftremmen, mata in de två bakre spännena (B) slitsarna i sätet

Spännena (B) måste tryckas helt genom skårorna genom att vrida dem 90 grader.

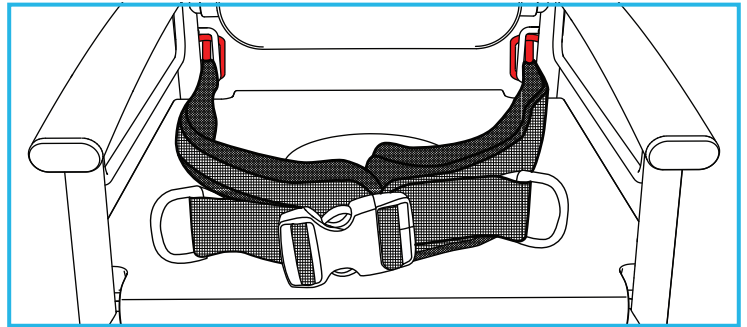

Pull the straps from the front to locate the buckles (B) as shown. Make sure the buckles cannot pull through the seat, by tugging firmly.

4.7 Fitting the Commode Pan:


Slide the commode pan into the rails on the seat assembly.



The commode pan is held in place by retainer pins, pull forward to release.

5. ADJUSTING THE COMMODE

5.1 Adjusting the Height:

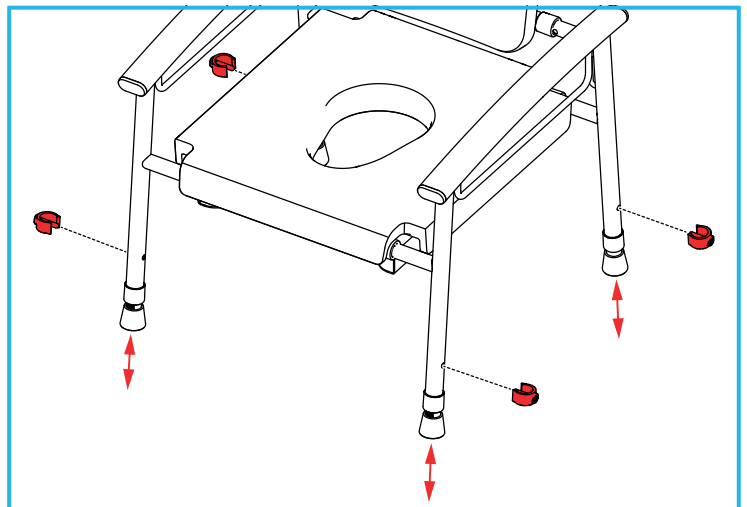


Ta bort de 4 x E-clipsen och justera benen till önskad höjd.

Byt ut de 4 x E-klämmorna.



Se till att alla ben har justerats till samma höjd.

5.2 Breddjustering:

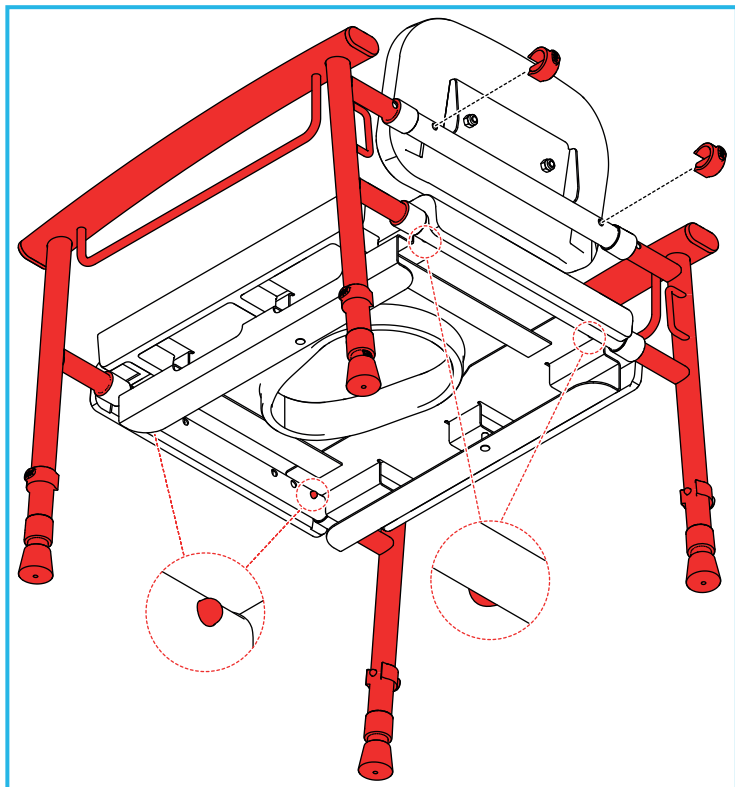

Ta bort de 2 x ryggstödet E-clips.
Tryck och håll i fjäderklämmorna för att frigöra varje sektion av sidoramsenheterna och justera till önskad bredd.
Rikta in hålen i ryggstödet och sätt tillbaka de 2 x ryggstödet E-clips.

5.3 Justera den valfria höftremmen (N99091)

För att justera, se bruksanvisningen som medföljer höftremmen.

6. UNDERHÅLL

Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador, var särskilt uppmärksam på skicket på hjulen och plastfogdistanserna. Eventuella misstänkta fel eller skador ska rapporteras till leverantören och produkten tas ur bruk omedelbart.
Kontrollera att alla fixer och knappklämmor är korrekt monterade utan överdriven rörelse.

7. Rengörning

Rengör regelbundet med ett neutralt rengöringsmedel för allmänt bruk och varmt vatten.

Kontrollera att rengöringsprodukten är lämplig före användning. Använd inte slipande rengöringsmedel eller trasor eftersom dessa kan skada ytan permanent och göra garantin ogiltig.

För att desinficera, torka av med en utspädd bleklösning och skölj noggrant med färskt vatten.

Denna duschstol är lämplig för termisk dekontaminering och kan ångrengöras eller autoklaveras vid rengöringscykler upp till 80°C.

Låt produkten torka helt före användning/förvaring..

8. TILLBEHÖR & RESERVDELAR

N99091: Midjebälte (medium)

P77928: Potta

P11668: NUVO reservdelssats (ovala ändstycken x 4, utbyteshylsor x 4, E-clips x 4, antiskrammelkragar x 4). För mer information besök vår hemsida eller ring kundtjänst.

9. AVFALLSHANTERING

Denna produkt bör rengöras noggrant före kassering. Denna produkt är tillverkad av metall och plast och kan kasseras genom lokala myndigheters hushållsavfalls- och återvinningscentraler eller genom lokala handelsavfallsinsamlare.

10. GARANTI

EUFORIA AB garanterar denna produkt under en period av 12 månader, från inköpsdatum, mot felaktiga material och utförande.

Denna garanti täcker inte; missbruk, missbruk, störning eller manipulering av någon del av produkten.