



drive

DeVilbiss®
HEALTHCARE

Bruksanvisning



Solido

Säkerhetshandtag med sugkropp

Artikelnummer	660100100	32,5 cm
Artikelnummer	660100200	58 cm
Artikelnummer	660100300	88 cm



Avstånd mellan vägg och handtag	3,5 cm
Vikt	600 g, 1000 g, 1300 g
Max. belastning	70 kg

Produktinnehåll

Suction grab bar with 2 suction cups. Suction grab bar is ready for use.

Montering

Montering kräver inga verktyg. Kontrollera vakuumsugskopparna och ytan den ska fästas på. Rengör ytan noggrant. Pressa gummiskivorna ordentligt mot ytan. De lutande vakuumpakarna måste vara lösa vid denna punkt och hela varje gummiskiva måste ligga i ytan. (1)

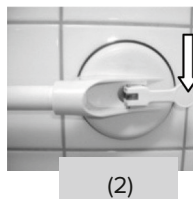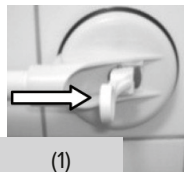


Se till att gummiskivorna är helt i kakelområdet eller andra ytor så att skivorna inte täcker några injekteringslinjer eller andra fogar. Skivorna bör placeras minst 11,5 cm från alla leder. (se 1) Tryck först ner den ena lutningsspaken och sedan den andra. Motståndet hos det genererade negativa trycket måste vara klart faktum. Ju större motståndsfaktum av vakuumpakarna är, desto bättre sugkraft har griphandtaget. Om du använder stängen regelbundet får du en känsla för vakuumstyrkan och sugkraften som genereras. Före varje användning, testa att suganordningen håller fast. Om vidhäftningen verkar otillräcklig, släpp skenan och sätt tillbaka den igen.

Om den erforderliga sugeffekten inte har uppnåtts ska stödet inte användas!


Rätt



Fel

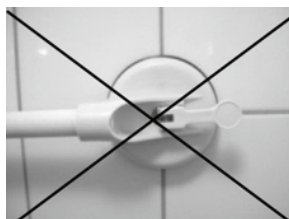

Sugkoppsbyte

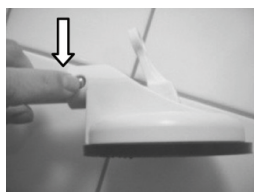

Sugkoppsbyte



Borttagningsinstruktioner: Lossa badspärrarna. Skjut fingertoppen under gummitätningen i varje ände för att frigöra suget. För byte av sughuvudet, tryck på spärren på sidan och dra av sughuvudet i pilens riktning. Tryck på det nya sughuvudet tills det låser tydligt.

Säkerhetsföreskrift

VARNING:

Denna produkt är designad för att ge stöd. Den är inte designad för att hålla en persons hela kroppsvikt. Innan du använder stödhandtaget, rengör och torka området där stödhandtaget ska fästas och läs instruktionerna noggrant.

Var noga med att testa stabiliteten på stödhandtaget före varje användning.

Se alltid till att handtaget är ordentligt fastsatt före varje användning och sätt alltid tillbaka det om det är löst. Använd inte sughandtaget om det är skadat!

Rengörning och underhåll

Håll alltid gummiskivorna fria från fett och damm. Rengör gummiskivorna med vanliga hushållsrengöringsmedel (ingen ättiksyra). Utsätt aldrig gummiskivorna för direkt solljus under längre perioder, då förlorar de snabbt sin elasticitet. Kontrollera gummiskivorna för eventuell försämring.

Om sugkopparna visar skada byt omedelbart!

Teknisk data			
Artikelnummer	660100100	660100200	660100300
Totallängd	325 mm	580 mm	880 mm
Greplängd	100 mm	320 mm	620 mm
Avstånd mellan grepp och vägg	35 mm		
Färg	Vit		
Sauger Ø / Suction Cups Ø	120 mm		
Vikt	0,6 kg	1,0 kg	1,3 kg
Max belastning	70 kg		
Material grepp	Högkvalitativ plast PP		
Material sugkopp	NBR		
Innermaterial i grepp	VA (rostfritt stål)		

Garanti

Vi utfärdar en garanti på 24 månader från inköpsdatum. Med reservation för tekniska ändringar. Per 10/2022