



TSE 120 / TSE 120 Plus



Förord

Tack för att du har valt en produkt från Drive DeVilbiss. Du kommer inte att bli besviken över designen, funktionaliteten och kvaliteten på denna produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant före första användningen. Den innehåller viktig säkerhetsinformation och värdefulla tips för korrekt användning och skötsel.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information, kontakta din Drive DeVilbiss specialiståterförsäljare som levererade din produkt.

Denna bruksanvisning innehåller all viktig information för justering och drift. Den senaste bruksanvisningen finns som PDF online eller kan beställas från kundtjänst. Förstorade format för synskadade kan visas.

Synskadade användare måste instrueras av sin vårdare. Reparationer samt vissa justeringar kräver särskild teknisk utbildning och måste därför utföras av återförsäljaren av medicintekniska produkter.

Declaration of conformity

Ovanstående produkter förklaras härmed överensstämma med EU:s förordning för medicinska produkter 2017/745.

Produktlivslängd

Vårt företag antar en livslängd på fem år för denna produkt så länge produkten används på avsett sätt och alla underhålls- och servicekrav följs.

Denna livslängd kan avsevärt överskridas om produkten hanteras, repareras, underhålls och används varsamt och det inte finns några tekniska begränsningar baserat på vidareutveckling av vetenskap och teknik.

Livslängden kan dock förkortas avsevärt genom extrem och felaktig användning. Vårt företags fastställande av livslängden representerar ingen ytterligare garanti.

Återvinning

Då ni inte vill nyttja produkten ytterligare, kontakta oss eller lämna den på en återvinningscentral.

Typskylt



1. Artikelnummer
2. Artikelbeteckning
3. Tillverkare
4. Serienummer
5. UDI-Code
6. Maximal belastning
7. Beakta Användaranvisningen
8. Medicinsk produkt
9. Produktionsdatum (år-månad)

Återanvändning

Denna produkt är avsedd att kunna återanvändas av annan brukare. Se därför till att alla nödvändiga tekniska underlag som behövs för en säker användning överlämnas till den nya brukaren.

Produkten behöver då testas av fackfolk, samt rengöras och sättas i gott skick





I detta arbete skall instruktionerna från tillverkaren beaktas och de skall kunna uppvisas på förfrågan. För tillbehör, kontakta Euforia AB.

Garanti

Garantin gäller i 24 månader från inköpsdatum. Om ett material- eller tillverkningsfel föreligger ersätter vi defekta delar kostnadsfritt.

Förslitningsdelar täcks i allmänhet inte av garantin, såvida inte nyttjandet av en reparatör eller behovet av en ersättningsdel, entydigt kan härledas till ett material- eller tillverkningsfel.

Vi reserverar oss för tekniska eller designmässiga förändringar.

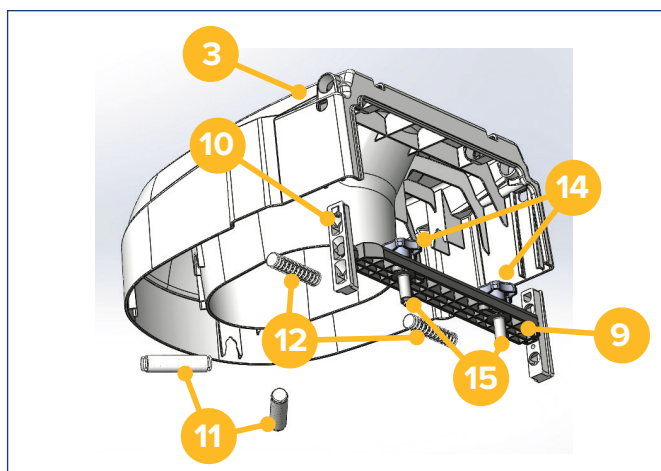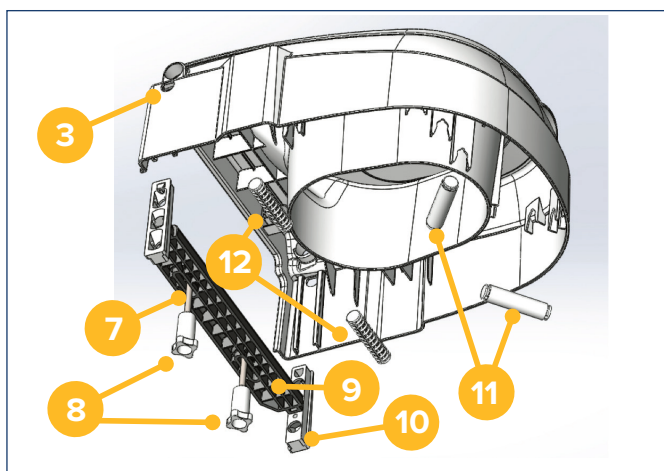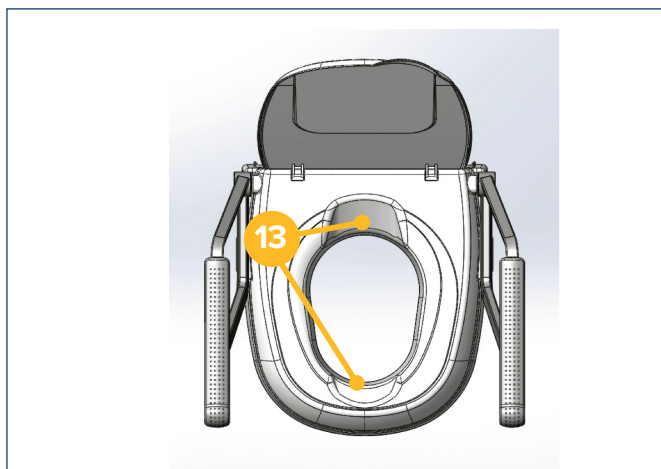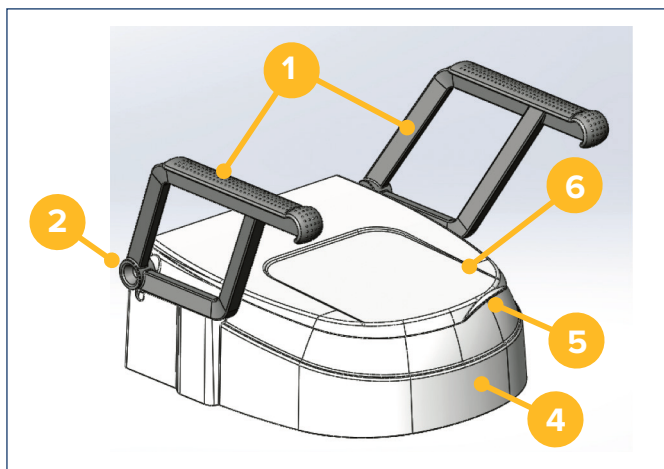

TSE 120

TSE 120 Plus

- 1. Armstöd
- 2. Armstödshållare
- 3. Låsmekanism för justerbar hållare
- 4. Basenhet
- 5. Infällt grepp (i locket)

- 6. Lock
- 7. Fästskruv
- 8. Räckflade muttrar
- 9. Bakre stöd
- 10. Justerbara fästen

- 11. Främre stöd
- 12. Stöd
- 13. Hygienöppningar
- 14. Stjärnskruv
- 15. Toppmonteringsstift

Användning

Användning av toaletten försvåras på grund av oanpassad sitthöjd på grund av begränsad förmåga att sitta ner och stå upp samt begränsad kontroll över bålen med funktionsstörning i nedre extremiteten med väsentligt begränsad eller helt frånvarande rörelse i lederna och/eller begränsad muskelstyrka av den nedre extremiteten och/eller skada på ländryggen, höften och/eller knäet och/eller skada på nervsystemet/centrala nervsystemet och/eller skada på muskelfunktionen med begränsad eller frånvarande stabilitet i bålen.

Leveransens

1 x A	Basenhet
1 x B	Stöd
2 x C	Justerbar hållare
2 x D	Främre stöd
2 x E	Stöd
2 x F	Fästskruvar (endast för TSE 120)
2 x G	Räckflade muttrar (endast för TSE 120)
2 x H	Stjärnskruv (endast för TSE 120 Plus)
2 x I	Toppmonteringsstift (endast för TSE 120 Plus)
2 x J	Armstöd (ej för 520500300 TSE 120 utan armstöd)
1 x	Bruksanvisning
1 x	Vinyl handskar

Säkerhets instruktioner

- Använd inte om det finns några defekter!
- Varning – risk för halka/fall!
- Locket får inte användas som ryggstöd i öppet läge!
- Locket får inte bära en belastning när det är stängt (t.ex. genom att sitta på det)!
- Kontrollera regelbundet att den upphöjda toaletsitsen sitter fast på toalettskålen. Dra åt de räfflade muttrarna vid behov.
- Notera den tillåtna maximala vikten för användaren. Denna information finns i de tekniska data i denna bruksanvisning samt på typskylten.

Användning


Den upphöjda toaletsitsen TSE 120 är lämplig för nästan alla standardiserade eller kommersiellt tillgängliga toalettskålar.

Montering


Ta bort sitsen och locket från toalettskålen. Montering sker utan verktyg.

TSE 120:

Placera den bakre delen av stödet på den keramiska skålen (B) med fästskruvarna (F). Skruva i de räfflade muttrarna (G) underifrån men dra inte åt dem ännu. Rikta in den bakre delen av stödet mot mitten av den keramiska skålen och dra åt de räfflade muttrarna (bild 1).

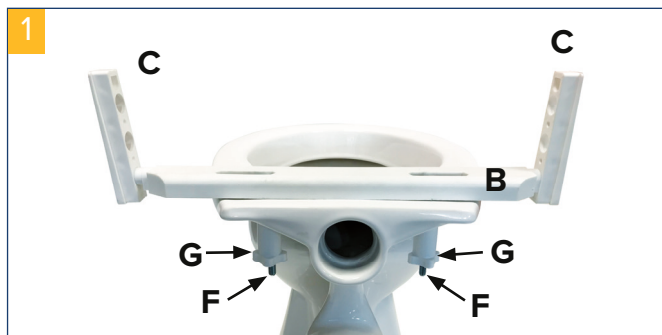

Sätt in de justerbara hållarna (C) i önskad höjd (8,5 / 12/15,5 cm) på baksidan av stödet (B) till höger och vänster (bild 2).


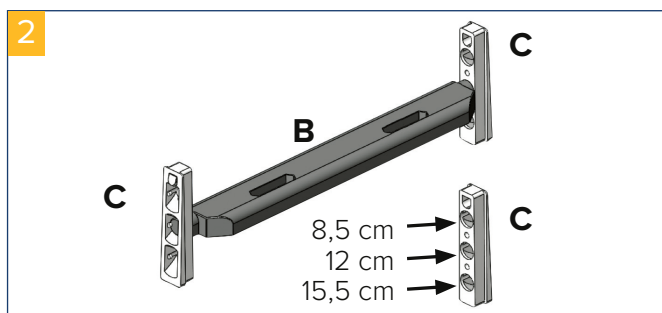


För att justera höjden i fronten, sätt in stöden (D) i motsvarande öppning tills de höras klicka på plats (bild 3).

Se till att framsidan stöder (D) på höger och vänster är var och en insatt samtidigt höjd.

De främre stöden (D) kan ställas lägre än det bakre stödet (B).

Sätt in de två stöden (E) i motsvarande öppningar på baksidan tills de hörbart klickar på plats (bild 3). Sätt in kroppen på den upphöjda toaletsitsen (A) i de justerbara hållarna (C). Därvid måste de justerbara hållarna (C) gripa in i låsflikarna (L) i kroppen (A) (bild 4+5).

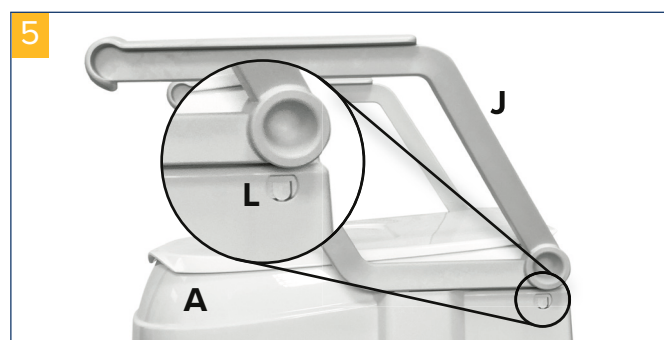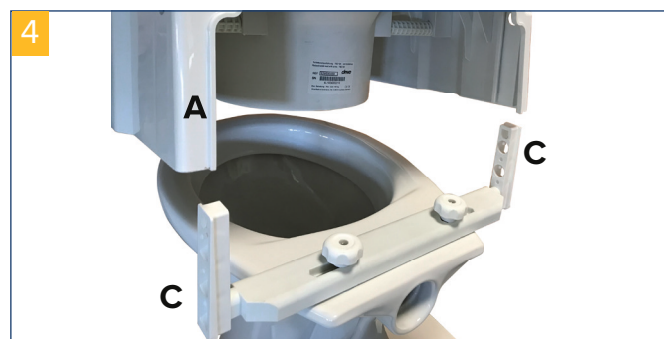



De justerbara hållarna (C) kan bara sättas in i en riktning i den upphöjda toaletsitsen.

TSE 120 PLUS:

Tryck på toppmonteringsstiftet tillsammans **(I)** som visas på bilden och sätt ner i monteringshålen på keramisk skål **(bild 6)**.



Placera den bakre delen av stödet **(B)** på den keramiska skålen och skruva in stjärnskruvarna **(H)** uppifrån men dra inte åt dem ännu. Rikta in den bakre delen av stödet **(B)** i mitten på den keramiska skålen och dra åt stjärnskruvarna **(H)** **(bild 7+8)**.

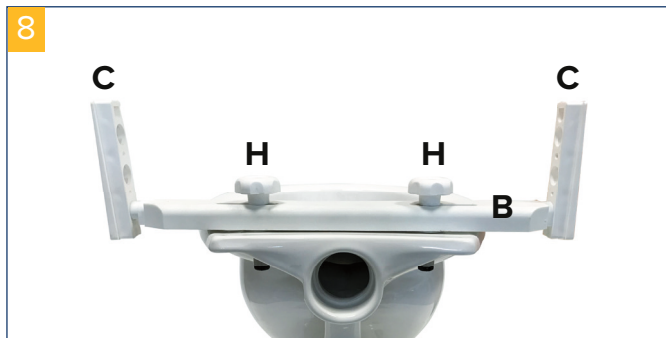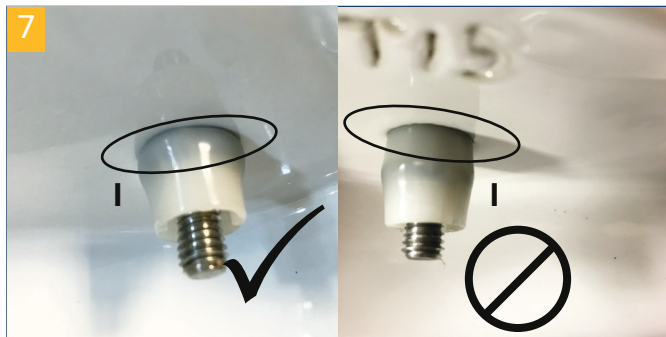

Sätt in de justerbara hållarna **(C)** i önskad höjd (8,5 / 12/15,5 cm) på baksidan av stödet **(B)** till höger och vänster **(bild 2)**.

För att justera höjden i fronten, för in stöden **(D)** i motsvarande öppning tills de hörbart klickar i plats **(bild 3)**.

- Se till att de främre stöden **(D)** till höger och vänster sätts in på samma höjd.
- De främre stöden **(D)** kan ställas lägre än de bakre stöden **(B)**.
- Sätt in de två stöden **(E)** i motsvarande öppningar på baksidan tills de hörbart klickar på plats **(bild 4)**.
- Sätt in kroppen **(A)** på den upphöjda toalettsitsen i de justerbara hållarna **(C)**. Därvid måste de justerbara hållarna **(C)** gripa in i låsflikarna **(L)** i kroppen **(A)** **(bild 4 +5)**.

De justerbara hållarna **(C)** kan bara sättas in i en riktning i den upphöjda toalettsitsen.


MONTERING AV LOCK:

Locket är förmonterat vid leveranstillfället, men kan bytas ut vid behov. För att göra detta, vänd kroppen **(A)** på den upphöjda toalettsitsen och tryck på lockklämmorna samtidigt.


Locket kan sedan tas ut ur hållarna. Sätt på det nya locket.

ARMSTÖD:

Skjut in armstöden **(J)** i sidled i armstödshållarna som är avsedda för detta ändamål **(bild 9)**.

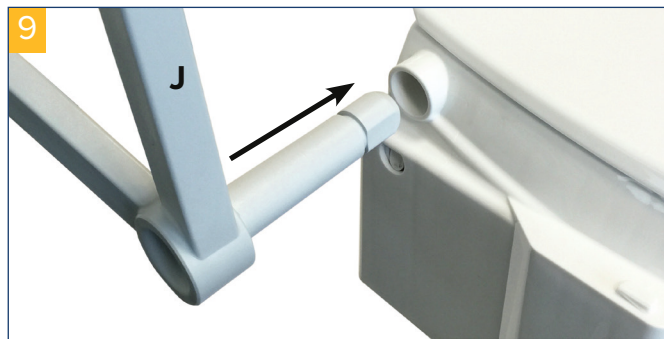

När du gör det ska pilarna på armstödet **(J)** och armstödshållaren matcha **(bild 10)**.

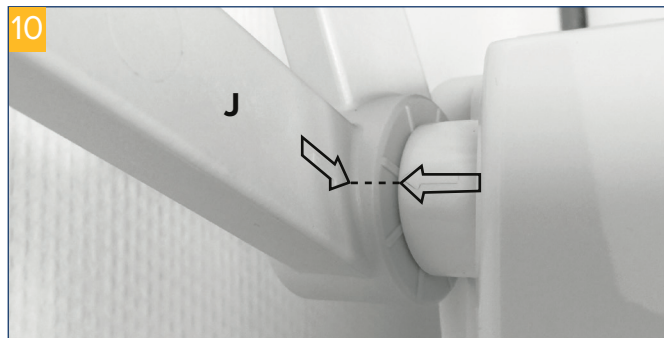

Tryck nu in armstöden **(J)** tills de hakar och fäll sedan ner dem.

Höjdinställningar

Den upphöjda toalettsitsen kan valfritt justeras med de justerbara hållarna **(C)** för en höjd av 8,5 cm, 12 cm eller 15,5 cm.

- Tryck lätt in låsflikarna **(L)** till höger och vänster under armstödshållarna och lyft sedan upp den upphöjda toalettstolen.
- Dra ut de justerbara hållarna **(C)** och justera önskad höjd **(bild 10)**.
- Se till att de justerbara hållarna **(C)** till höger och vänster är anslutna på samma höjd.
- För att justera höjden i fronten, för in stöden **(D)** i motsvarande öppning tills de hörbart klickar på plats.
- Se till att de främre stöden **(D)** till höger och vänster sätts in på samma höjd.
- De främre stöden **(D)** kan ställas lägre än de bakre stöden **(B)**.
- Sätt in kroppen på den upphöjda toalettsitsen **(A)** i de justerbara hållarna **(C)**. Därvid måste de justerbara hållarna **(C)** gå i ingrepp med låsflikarna **(L)** i kroppen **(A)**.
- De justerbara hållarna **(C)** kan bara sättas in i en riktning i den upphöjda toalettsitsen.

Rengöring | Underhåll

- Rengör regelbundet med en fuktig trasa!
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel!
- Använd inte slipande rengöringsmedel!
- Använd inga högdoserade klor- och vinägebaserade rengöringsmedel!
- För att desinficera kan ett spraydesinfektionsmedel användas som Descosept AF eller Bacillol AF.
- Kontrollera skruvarna regelbundet och dra åt vid behov.
- Produkten bör inte utsättas för temperaturer över 60°C under långa perioder (till exempel användning i bastu, etc.).
- Vid defekter, kontakta din återförsäljare där du köpte denna produkt.

Teknisk information

Produkt	TSE 120 utan armrest	TSE 120 med armrest	TSE 120 PLUS
Artikelnummer	520500300	520500400	520500500
Totallängd	49 cm	49 cm	49 cm
Totalbredd	46 cm	55 cm	55 cm
Totalhöjd	19 cm	38 cm	38 cm
Öppning längd	27 cm	27 cm	27 cm
Öppning bredd	20.5 cm	20.5 cm	20.5 cm
Bredd mellan armstöden	-	46 cm	46 cm
Höjdjustering	8.5 / 12 / 15.5 cm	8.5 / 12 / 15.5 cm	8.5 / 12 / 15.5 cm
Vikt	2.6 kg	4.1 kg	4.1 kg
Max belastningsvikt	120 kg	120 kg	120 kg
Färg	vit	vit	vit
Material	Plastic (PP / PA)	Plastic (PP / PA)	Plastic (PP / PA)