

Sänggrind 091089358

Innan du använder din Sänggrinden är det viktigt att du läser och bekantar dig med bruksanvisningen.



Beskrivning

Sänggrinden är designad för att ge extra säkerhet för användare när de ligger i sängen. Armarna glider under madrassen och ett snörbandssystem används för att säkra skenan ordentligt på plats på sängen. Sänggrinden kan förvaras under sängen under dagen eller demonteras i tre delar.

Rengöring och skötsel

Torka av med en fuktig trasa och lösning av mildt rengöringsmedel.

Installation och justering

Se nästa sida för instruktioner.

⚠ Försiktighetsåtgärder

För att säkerställa användarens säkerhet måste följande säkerhetsåtgärder iakttas:

- En fullständig riskbedömning bör göras före användning, av den som sitter i sängen och sänggrinden för att säkerställa att båda är lämpliga.
- För att säkerställa att sänggrinden inte rör sig under användning bör grinden alltid användas tillsammans med snörbandssystemet.
- För att förhindra risken för att användaren fastnar mellan skenan och madrassen, måste snörbandssystemet vara spänt hela tiden.
- Nätbandssystemet måste bytas ut om tecken på slitage blir uppenbara.
- Sänggrinden får inte användas av personer under 18 år eller av små vuxna.
- Avståndet mellan madrassens överdel och botten av den lägsta skenan bör vara mindre än 60 mm. Avståndet mellan änden av grinden och huvudbrädet/ändpanelen bör antingen vara mindre än 6 cm eller större än 32 cm.
- Sänggrinden är inte lämplig för användning med madrasser med tjocklek mindre än 10 cm (4").
- Sänggrinden är inte lämplig att använda med sängar med lamellbas, eller baser med ett exponerat sammanlänkat trådsystem, eftersom skenans stödarmar kanske inte får tillräckligt stöd.
- Se till att alla lösa ändar av snörbandssystemet är undanstoppade.
- Sänggrinden är avsedd som ett hjälpmedel för att förhindra att en normalt orolig sovare rullar upp ur sängen. Den ska inte användas med personer som är utsatta för anfall eller som är onormalt oroliga sovande.

Installation och justering

Lägg ut snörbandssystemet på golvet. Två av ändarna ska ha grå plastflikar (**A**) **Figur 1**, och de fria ändarna har inga flikar. Från sänggrindens sida av sängen, för in de fria ändarna av snörbandssystemet mellan madrassen och sängbotten så långt in som möjligt. Från motsatt sida av sängen, nå mellan madrassen och sängbotten och dra igenom de fria ändarna, som **figur 1**. Se till att de grå plastflikarna på Sänggrindens-sida inte glider mellan madrassen och sängbotten.

Sätt in de långa armarna (**B**) i vardera änden av sidoskenan (**C**) och fäst med de fyra stiftklämmorna (**D**) (**Figur 2**). **OBS:** Det är viktigt att se till att dubbarna på skenan är vända utåt, bort från madrassen. (Se **E** i **figur 3**).

Skjut in de långa armarna på Sänggrinden under madrassen. Se till att grinden är placerad centralt mellan de två benen längs ena sidan. Fäst de två grå plastflikarna (**A** i **figur 1**) över de två dubbarna på nattskenan (se **figur 4**). Dra i snörena från andra sidan av sängen. Kontrollera att flikarna och snöret går runt utsidan av Sänggrinden enligt **figur 4** och varningsetiketten på produkten.

Bind de fria ändarna av sladdarna säkert på plats överst på benen som visas i **figur 5**. För divansängar utan ben, knyt runt toppen av hjulen.

När den väl har installerats ska grinden sitta ordentligt fast i sängen och får inte dras bort från madrassen. Om så inte är fallet, bör enheten justeras om och återställas vid behov.

Sänggrinden är nu redo att användas. För att underlätta för användaren att komma i och ur sängen rekommenderas att skenan tas bort och ersätts av en assistent. Detta uppnås enkelt genom att enkelt släppa de grå plastflikarna (**A**). På så sätt kan grinden enkelt tas bort från sängen för att bädda eller byta säng utan att behöva ta bort snörbandssystemet. De fyra stiftklämmorna (**D**) kan tas bort så att benen kan vikas inåt så att nattskenan kan förvaras under sängen etc.

Bild 1

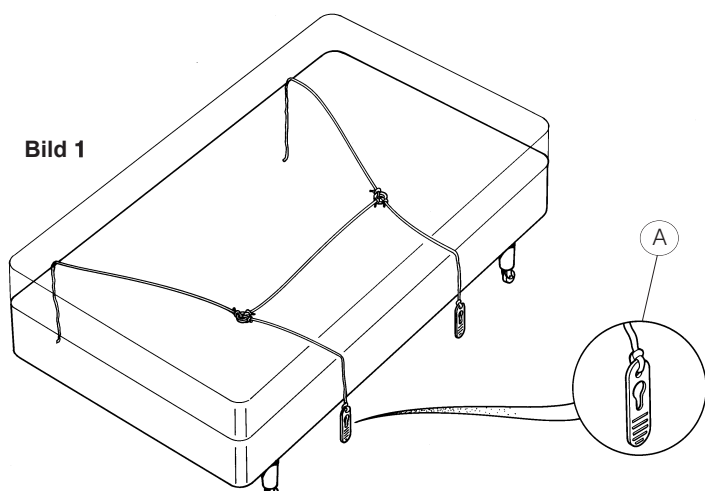


Bild 2

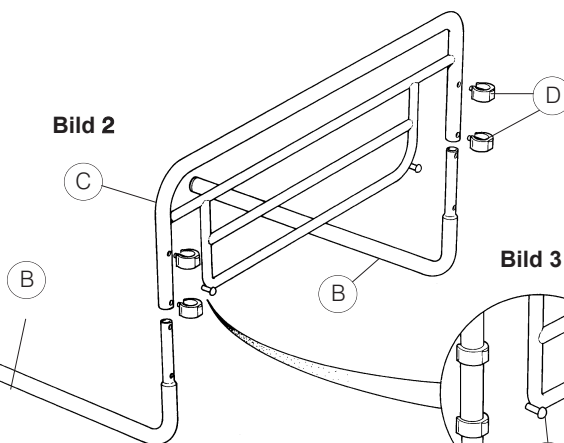


Bild 3

Se till att dubben är vänd så här

Bild 4


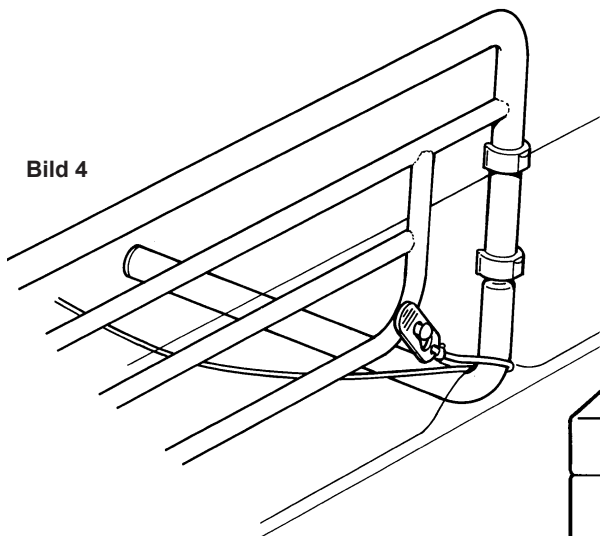


Bild 5



Produkten följer
(EU) MDR 2017/745
och 2007/47/EG för
medicintekniska produkter.

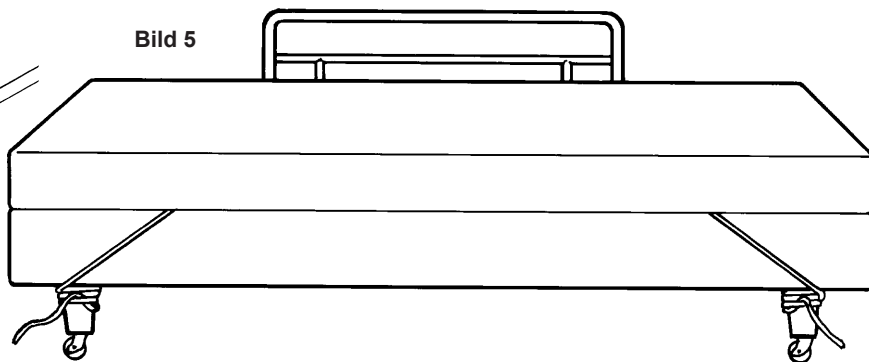

Vänligen spara dessa instruktioner för framtida behov.