



PROTEKTOR

Rollator - Rullstolsparaply



Instruktionsmanual



Tack för att du köpte PROTEKTOR paraplyet för rollatorer och för ditt förtroende för ROLKO-produkter. Innan du använder denna produkt första gången, läs noggrant igenom hela användarmanualen. Kontrollera att alla delar ingår och följ alla säkerhetsinstruktioner.

01. Tillämpning och syfte

Rollatorparaplyet PROTEKTOR erbjuder ett idealiskt skydd mot regn och sol. Rollatorparaplybasen säkerställer snabb och enkel installation på vanliga 4-hjuliga rollatorer och även rullstolar, vilket gör att du kan skjuta din rollator eller använda din rullstol säkert med båda händerna. Basen lämnar tillräckligt med plats för shoppingkassar, käpphållare, ryggbälten etc.

02. Kontraindikation

Vårt paraply är inte lämpligt för alla applikationer som avviker från avsedd användning och/eller kan leda till fara. Rollatorparaplyet får inte användas, om det inte finns någon lämplig fästpunkt på rullstolen/rollatorn, de medföljande plastklämmorna på paraplybasen inte passar ordentligt i rullstolen/rollatorröret eller så är tipssäkerheten inte längre garanterad. Låt din återförsäljare kontrollera detta och notera säkerhetsinstruktionerna nedan. Denna produkt är inte heller lämplig för Delta-vandrare (risk för vältning!)


03. Säkerhets instruktioner

- Innan du använder paraplyet första gången, gör dig bekant med hur paraplyet och tillbehöret fungerar. När du använder PROTEKTOR, ta hänsyn till dess höjd och storlek.
- Bruksanvisningen är en del av paraplyet och ska lämnas över när paraplyet lämnas vidare.
- Öppna paraplyet (med automaten) aldrig nära din kropp. För att undvika skador, se till att ingen annan person är nära runt. Tänk på utrymmesbehovet för det öppna paraplyet.
- Kontrollera före varje användning om paraplybasen och paraplyet är ordentligt fastsatta.
- Fixeringsenheten måste installeras på ett sådant sätt att rollatorns bromsfunktion inte försämras när paraplyet öppnas eller stängs. Belysning, ringklocka, käpphållare etc. får inte påverkas.
- Observera även monteringsanvisningen under 4: manövrering och fastsättning.
- Fäst paraplybasen på ett sådant sätt på rollatorn att du enkelt kan stänga och fälla ihop paraplyet. Stäng paraplyet och knyt kardborrebanden innan du viker ihop det.
- Varning: Risk för att fingrarna kläms när paraplyet stängs eller ledanslutningarna justeras!
- Se alltid upp för en fri sikt, särskilt i vägtrafiken.
- Tänk på höjden och storleken på det öppna paraplyet.
- Om vindförhållandena är för starka måste rollatorparaplyet vara stängt, inte lämpligt för Delta-vandrare (risk för vältning!)
- Flytta inte och bär inte rollatorn i paraplybasen.
- Lutningsstabiliteten hos rollatorn kan förändras negativt efter att paraplyet satts fast.
- Följ monteringsanvisningarna och få råd från en fackhandlare.

04. Handhavande och montering

Handhavande


För paraplyet till önskat läge genom att trycka på den fjäderbelastade knappen (3) på var och en av dem ledanslutningarna. Dessutom kan paraplyet vridas genom att lossa stjärnskruven på paraplymonteringsklämman. Dra sedan fast stjärnskruven ordentligt igen! Öppna kardborrebanden (1) på paraplyet och tryck på frigöringsknappen (2). Observera: paraplyet öppnas omedelbart. Om det inte används och för att spara utrymme kan paraplyet fällas bort på lederna.

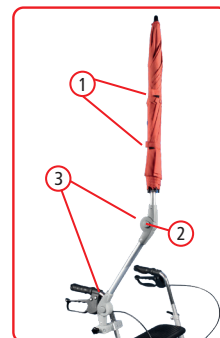


Montering

Paraplybasen är redan förberedd för fastsättning av ovala rör, på höger sida av rollatorn (fig. a). För andra rörformer, byt ut klämmor och insexskruvar vid behov.


- 1 Välj de matchande klämmorna: ovala rör (basuppställning, fig. a), runda rör (18/20/22/25 mm, fig. b), eller mix-match-klämmor för specialanpassade rör (fig. d).
- 2 Välj lämplig insexskruv (35/45/60/75 mm, fig. d) och fäst paraplybasen med insexnyckel i önskat läge på rollatorns höjdjusterbara vertikala handtag.
- 3 Justera lutningsvinkeln på paraplybasen till lutningen av handtagsröret genom att först ta bort stjärnskruven helt. Efter justeringen, sätt tillbaka stjärnskruven i hål I eller II på fästet (fig. g+h).
- 4 För att fästa paraplyet på ett horisontellt rör, ta först bort insexskruven och stjärnskruven. Fäst därefter paraplybasen igen på fästet via hål I och IV (fig. c+f).
- 5 Sätt in paraplyet med skaftet i paraplybasen och dra åt Star-skraven ordentligt. Om det behövs, dra åt insexskruven igen för att säkerställa att paraplyet sitter fast i basen!
- 6 För en installation på vänster sida av rollatorn, vrid paraplybasen, justera lutningsvinkeln på paraplybasen till lutningen av handtagsröret genom att först ta bort stjärnskruven helt. Sätt tillbaka stjärnskruven efter justeringen i hål III eller IV på fästet (fig. e).

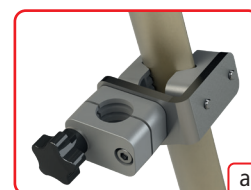


Ovalt röraggregat

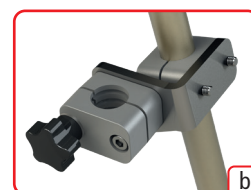


Runda rörmontering

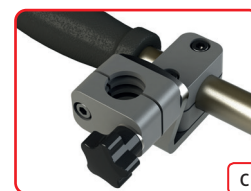


Horisontell montering

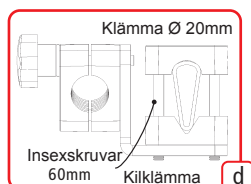


Kombination av klämmor för specialmontering av rör

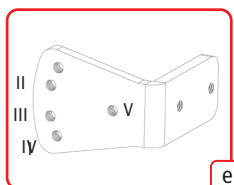


Hålmönsterfäste

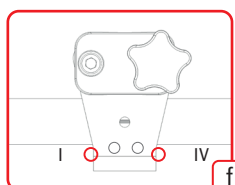

Tryckhandtagsfäste

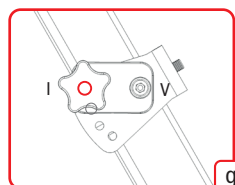

Fäste till ett lutande rör

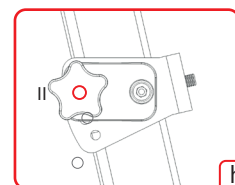

Bilaga till en vertikalt rör

05. Rengöring och desinficering

Tvätta av paraplyet med en fuktig trasa, om det behövs med tillsats av ett mildt rengöringsmedel. Använd ljummet vatten och vid behov icke-slipande, pH-neutraliserade kommersiella hushållsrengöringsmedel. Låt alltid skivan torka helt. Om nödvändigt, paraplyet kan desinficeras med hushållsdesinfektionsmedel (spray- eller torkdesinfektion). Följ alltid desinfektionsmedelstillverkarens appliceringsanvisningar. För att torka av paraplytyget måste paraplyet förvaras spänt. Klor, organiska eller oorganiska ämnen med aktivt klor får inte användas, eftersom de riskerar materialegenskaper, som kan orsaka materiella skador och av denna anledning fara för användaren eller hjälparen.

06. Underhåll

Kontrollera paraplyet och dess fäste för visuella defekter före varje användning. Se till att materialet är oskadat och att paraplyet är i rätt skick. Kontrollera minst en gång i månaden:

- de ledade ledernas låsfunktion och rotation,
- den automatiska öppningen av paraplyet,
- tätheten hos monteringsenheten på enheten och tillståndet för plastklämmorna,
- skicket på paraplyspetsen och tyget.

Instruktionsmanual



07. Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Effekter av väder och UV-strålning, mekanisk påfrestning samt naturligt åldrande eller vårdslös hantering kan orsaka för tidigt slitage, som tillverkaren inte har någon direkt påverkan på. Om paraplytyget är skadat, den automatiska öppningen visar funktionsfel, lederna är instabila eller defekta eller fixeringsenheten är defekt, måste paraplyet kasseras. Rörklämmor för fixeringsenheten kan beställas i fackhandeln. För information om rengöring och desinfektion, se avsnitt 5.

08. Avfallshantering

Alla delar av rollatorparaplyet kan kasseras på ett säkert sätt som hushållsavfall. För att göra detta, demontera rollatorparaplyet i sina enskilda delar så långt som möjligt för att kunna sortera materialet i efterhand.

09. Teknisk Data

Art.nr: HA-SCH-1-BG (Mörkgrön), HA-SCH-1-GG (Beige), HA-SCH-1-R (Röd)

Vikt: 1,1 kg


Paraply Ø (öppnat): 105 cm

Lämplig för rör med Ø 18 - 25 mm och ovala rör upp till 60 mm

Material: Polyester, aluminium, polyamid, stål, polypropen, ABS.

Leveransinnehåll

1. Rollatorparaply med ledkopplingar
2. Paraplybas, förmonterad med kilklämmor och 2 insexskruvar M6x60
3. Monteringsklämmor för rör Ø 18/20/22/25 mm
4. Set med insexskruvar M6x35/M6x45/M6x75
5. Insexnyckel
6. Användarmanual

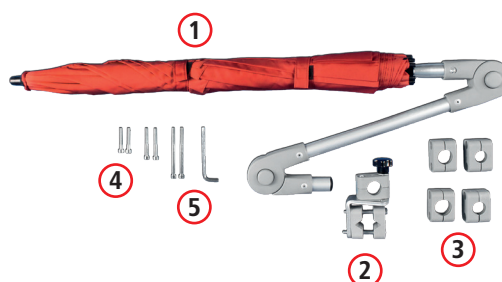

Operating Instructions: Rollator umbrella PROTEKTOR / 2022-10-24 / Rev. 16
HA-SCH-1-BG(-WZ), HA-SCH-1-GG(-WZ), HA-SCH-1-R(-WZ)



© Rolko Kohlgrüber GmbH, Industriestr. 14 - 16, 33829 Borgholzhausen, Germany

Reprint, also in extracts, only with prior permission by the editor. All rights reserved. The delivered product may differ from the illustrations in this manual. All technical data are characteristic and subject to construction and manufacturing conditioned tolerances.